


Set Up

1 VOORBEREIDING

SPOEL HET "DRUG" LUMEN

met Heparine/NaCl oplossing totdat deze door alle gaatjes naar buiten komt.

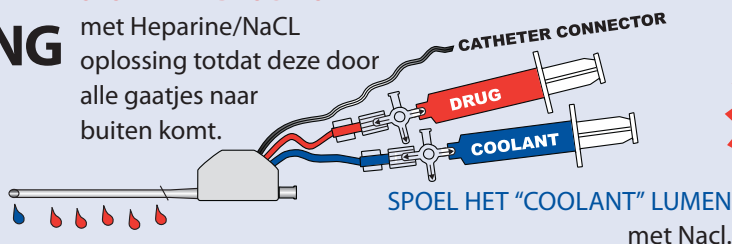


WAARSCHUWING!
aspireer nooit bloed door het "drug" lumen!

2 POSITIONERING

POSITIONEER DE CATHETER IN DE PATIËNT (6F of grotere sheat en 0,035" voerdraad)


3 INBRENGEN

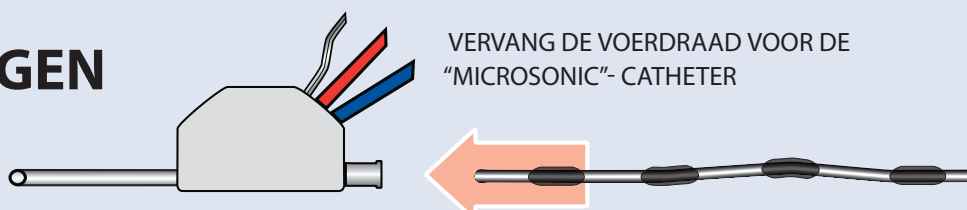

4 POMP

SLUIT HET "DRUG" LUMEN AAN OP DE INFUSIE POMP

Stel de pomp in op de gewenste snelheid volgens het ziekenhuis protocol.
Min. 5 ml/h
Max. 35 ml/h

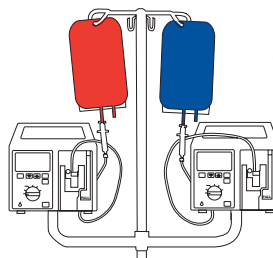


SLUIT HET "COOLANT" LUMEN AAN OP DE INFUSIE POMP

Stel de pomp in op de gewenste snelheid volgens het ziekenhuis protocol
Min. 35 ml/h
Max. 120 ml/h

5 AANSLUITEN


SLUIT DE CONNECTOREN VAN DE BEIDE CATHETERS AAN OP DE CONNECTOR INTERFACE MODULE (CIC)

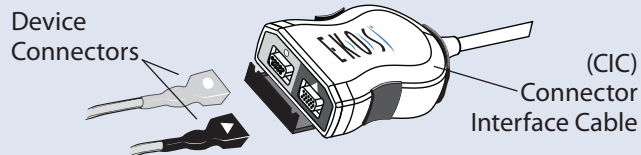

6 INSCHAKELEN

ZET HET EKOS APPARAAT AAN

DRUK OP **START** OM DE MICROSONIC CATHETER TE ACTIVEREN

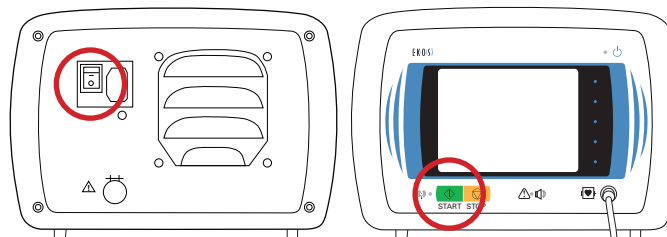

WAARSCHUWING!
Schakel het Ekos apparaat altijd uit alvorens de microsonic catheter terug te trekken uit de catheter

EKOS


EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

Indien u problemen blijft ervaren,
neem dan contact op met:
AngioCare 035 – 528 0470


Problemen Oplossen

EKOS SYSTEEM ALARMEN


1 Schakel alarm uit

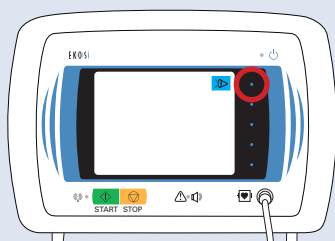

2 Controleer de verbindingen

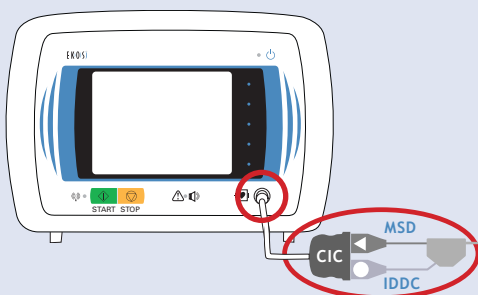


3 Druk op **START**

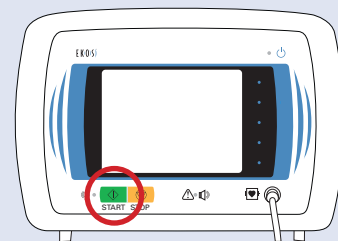


Apparaat start niet opnieuw op:

1 Schakel het apparaat uit en aan.
achterkant van het apparaat

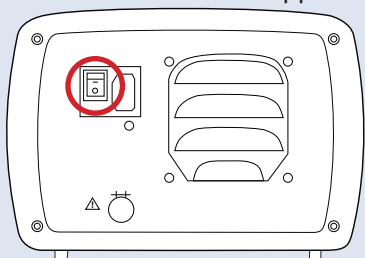


2 Druk op **START**

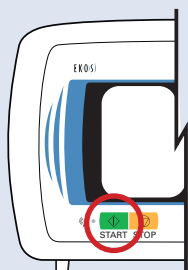

START ALARM

1 Druk op **START** indien nodig

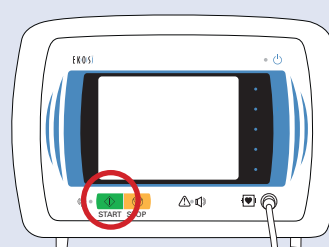

Zie gebruiksaanwijzing voor:

- icoon informatie
- additionele probleem oplossingen

EKOS[®]

EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

*Indien u problemen blijft ervaren,
neem dan contact op met:
AngioCare 035 – 528 0470*