


Oppsett

1 SKYLLING

SKYLL "DRUG LUMEN" med Heparin 100IE/ml inntil væske kommer ut av alle sidehullene.

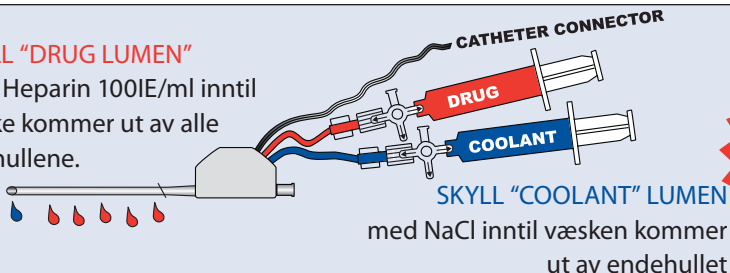


ADVARSEL!

Ikke aspirer blod tilbake i "drug lumen"

2 PLASSERING

PLASSER KATETERET I PASIENTEN
(Bruk 6French eller større introducer/hylse og 0.035 guidewire)

3 INNFØRING

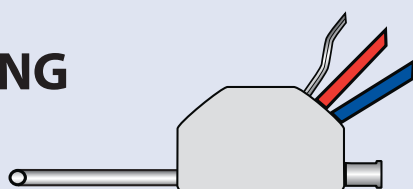


ERSTATT GUIDEWIRE MED EKOS ULTRALYD WIRE

4 PUMPER

KOBLE "DRUG LUMEN" TIL INFUSJONSPUMPEN

Følg sykehusets infusjonsprotokoll
Max 35 ml/time
Min 5 ml/time

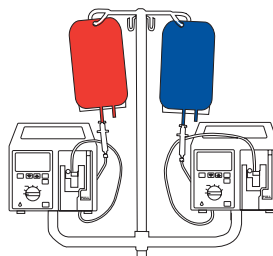

KOBLE "COOLANT LUMEN" TIL INFUSJONSPUMPEN


Max 120 ml/time
Min 35 ml/time

SKRU PÅ INFUSJONSPUMPENE

5 TILKOBLING


KOBLE DE 2 KABLENE TIL CIC

"Device Connectors"

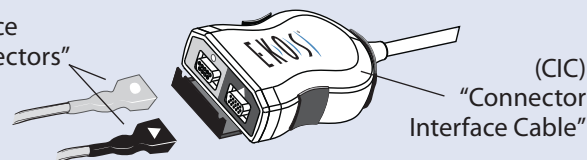


6 START

SKRU PÅ EKOS KONTROLLENHET

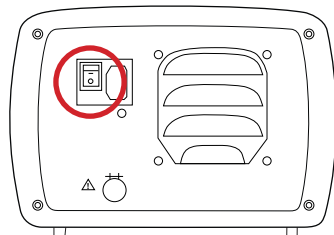

TRYKK **START** FOR Å AKTIVERE ULTRALYD WIREN PÅSE AT GUL LAMPE BLINKER

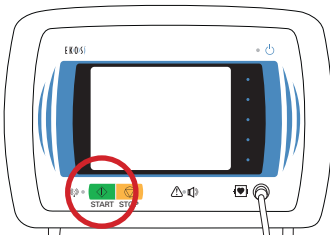

ADVARSEL!
SKRU ENHETEN AV for ultralyd wire taes ut av kateteret

EKOS


EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

Har du fortsatt problemer, vennligst ring:


Problemløsning

ALARMER PÅ KONTROLLENHETEN


1 Slå av lyden på alarmen

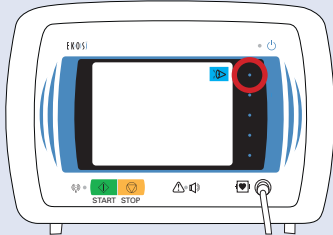

2 Sjekk koblingene

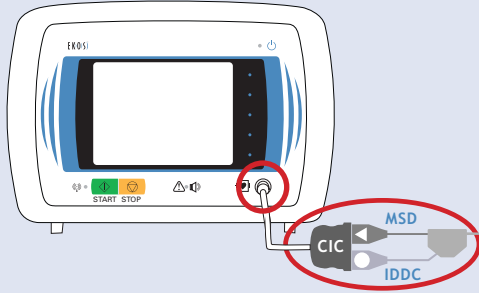


3 Trykk **START**

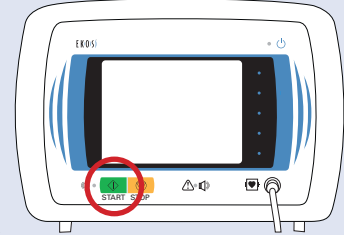


SYSTEMET RESTARTER IKKE

1 Turn control unit OFF & ON

Baksiden av enheten

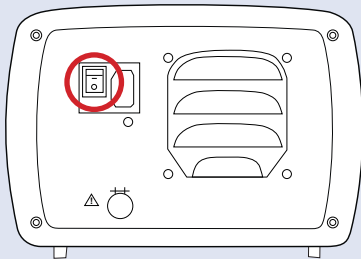


2 Trykk **START**

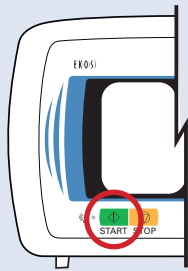

START VARSLINGS ALARM

1 Trykk **START**
Om nødvending

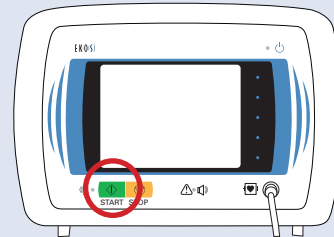

Se bruksanvisning for: • Informativ ICON forklaringer
• Ekstra tips for problemløsning

EKOS

EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

*Har du fortsatt
problemer, vennligst ring:*

6125-003 Rev B

CE
0086